

【グルコカード G ブラックの主な特長】

○見やすいカラー液晶画面

TFT カラー画面と見やすい日本語フォントを採用し、視認性を向上。また、測定結果が低値の時は青字、高値時には赤字で表示し、血糖値の変化への注意喚起を行っています。



結果表示



低値時




高値時

○操作方法、エラー時の対処方法を画面で説明

操作方法をイラストで説明し、患者さまの測定操作をサポートします。また、血液量の不足などのエラー発生時にも、対処方法が画面に表示されます。



操作方法

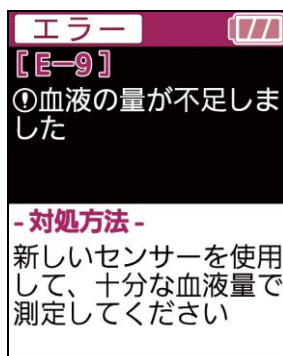

エラー表示



○療養支援機能でさらに使いやすく

・測定結果の解析

測定結果の検索ができ、低値・高値の発生時期や頻度を簡単に把握できます。さらに測定結果のグラフ化、測定値の平均値を表示でき、測定結果を視覚的に確認できます。



測定結果の検索




低値・高値の発生時期・頻度検索



測定結果のグラフ化

・測定結果の振り返り

低値・高値の原因が入力でき、測定結果の振り返りに役立ちます。

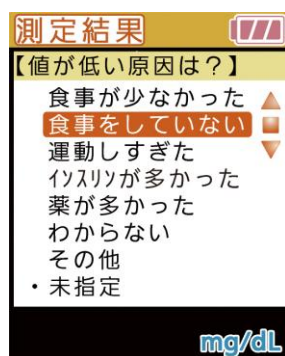

低値・高値の原因入力



測定結果の振り返り

・測定値への情報追加

測定値に食後経過時間や測定タイミング(毎食前後、就寝前、夜間など)を、情報として付与することができます。

・測定タイミングのお知らせ

アラームが7つまで設定でき、あらかじめ設定した測定のタイミングをお知らせします。毎日もしくは曜日別に繰り返し設定も可能です。

・Bluetooth(無線)による測定データの転送

Bluetooth Ver.4.0 によりスマートフォン用糖尿病管理アプリ「スマート e-SMBG」との通信が可能です。(現時点では、iPhone 版のみ)

さらに、糖尿病管理サイト[※]へ送信も可能で、より手軽に血糖値の管理を行うことができます。糖尿病管理サイトでは、患者さまご自身で数値を設定することができ、血糖値が高いもしくは低い状態であれば、あらかじめ設定したアドレスにメールを送信することができます。

※糖尿病管理サイト「糖尿病ケアサービス e-SMBG」(<http://e-smbg.net/>)

糖尿病患者さまがインターネット上で日常的に血糖値の管理を行うことができるサイト。利用にあたって登録費や月額使用料はかかりません。



○カスタム画面の設定が可能

携帯電話やスマートフォンと同様に、待受画面のカスタム設定が可能です。

<参考資料>

スマートフォン用 糖尿病管理アプリ「スマート e-SMBG」でできること

「スマート e-SMBG」は、『**血糖値の見える化**』を目的に、スマートフォンでの糖尿病データ管理を実現したサービスです。血糖値や HbA1c 値、体重、歩数、食事写真など、糖尿病管理に必要なデータを入力することで、記録やグラフ化が簡単にできます。なお、利用にあたって登録費や月額使用料はかかりません。



メインメニュー 画面

【主な特長】

○デイリーグラフで一覧表示

グラフ化することで、血糖値・食事内容・運動などをひとつの画面で確認できるため、直感的に日常生活を振り返ることが可能。



糖尿病管理: デイリーグラフ(血糖値・歩数・食事写真・イベント)

○スマートフォンで簡単に記録

- * 血糖値 測定した血糖値を簡単操作で入力が可能。
- * 食事内容 スマートフォンのカメラで食事を撮影するだけ。メニュー検索でカロリーや炭水化物、塩分を簡単に記録できます(約 500 種)。
- * 運動(歩数) スマートフォンのウィジェットで歩数を自動計測・記録します。

アークレイでは、患者さまならびに医療関係者の皆さまに、糖尿病関連検査の結果を活用し、より高い QOL を目指した糖尿病管理を行っていただきたいという思いから、糖尿病関連商品に『血糖値をよく見よう』というメッセージを設定しています。

＜自己検査用グルコース測定器「グルコカード G ブラック」の概要＞

名 称	自己検査用グルコース測定器「グルコカード G ブラック」
発 売 日	2013 年 5 月 8 日(水)
仕 様	
測 定 項 目	血液中のグルコース
測 定 範 囲	10～600mg/dL
必 要 検 体 量	0.6μ L(全血)
使用 センサー	自己検査用グルコースキット Gセンサー
測 定 時 間	点着検知後 5.5 秒
記 憶 データ数	450 測定
外 部 入 出 力	UART 通信端子 1 個、マイクロ USB(B)コネクタ 1 個、Bluetooth Low Energy (Bluetooth Ver.4.0)
温 度 補 正	内蔵温度センサーによる自動補正
使 用 環 境	温度:10～40℃、湿度:20～80%RH(非結露)
外 形 寸 法	41(横)×84(縦)×26(高さ)mm
重 量	75g
電 池	単 4 形アルカリ乾電池 2 個
電 池 寿 命	約 1,000 測定以上(使用方法によって測定可能回数が少なくなることがあります)
消 費 電 力	0.25W
付 属 品	取扱説明書(1 部)、添付文書(1 部)、保証書・保証書登録カード(1 部)、個人情報保護シール、収納ケース(1 個)、単 4 形アルカリ乾電池(2 個、装填済)
販 売 価 格	希望納入価格 9,000 円(税別)
承 認 番 号	22500BZX00085000
分 類	クラスⅢ(高度管理医療機器) / 特定保守管理医療機器

この商品は「アークレイマーケティング株式会社」が販売します。「アークレイマーケティング株式会社」はアークレイの日本国内の販売統括会社です。

＜会社概要＞

商 号	： アークレイ株式会社
代 表 者	： 代表取締役 執行役員社長 松田 猛
所 在 地	： 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町 689 京都御幸ビル 10F
電 話	： 050-5527-9301 (代表)
創 立	： 1960 年 6 月 10 日
設 立	： 1963 年 9 月 26 日
従 業 員 数	： 1,570 名(グループ全体) ※2012 年 11 月 1 日現在
事 業 内 容	： 臨床検査用の機器・試薬および検査データ管理システムの研究開発・製造・販売、 機能性食品素材の研究開発・販売